

## Karta katalogowa

## Chłodziarka Farmaceutyczna CHS 3+ A



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

**DANE TECHNICZNE**

obieg powietrza	wymuszony
pojemność komory [l]	200
pojemność użytkowa komory [l]	163
sterownik	mikroprocesorowy z wyświetlaczem LED
wyswietlacz	LED

**TEMPERATURA**

zakres temperatury pracy [°C]	0...+10
regulacja temperatury co ... [°C]	0,1
stabilność temperatury w 4°C [±/°C]*	1
jednorodność temperatury w 4°C [±/°C]*	2
ochrona nadtemperaturowa	klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880

**KOMORA**


drzwi	szklane
materiał komory	aluminium
materiał obudowy	blacha malowana proszkowo

**wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/**

szerokość A	620
wysokość B	1060
głębokość C	650

**wymiary komory [mm]**

szerokość D	480
szerokość D'	520
wysokość E	860
głębokość F	420
głębokość F'	480
głębokość G	320
wysokość H	640

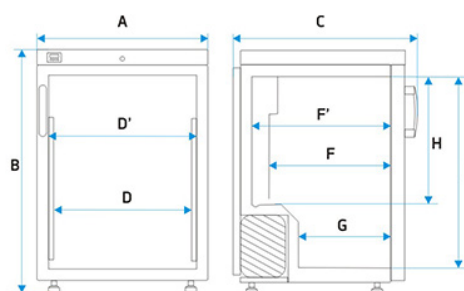

ilość półek (standard   max)	3   4
maksymalne obciążenie półki [kg] /2/	10
maksymalne obciążenie urządzenia [kg]	40
waga urządzenia [kg]	59

## PARAMETRY ELEKTRYCZNE

zasilanie	230V 50Hz
moc znamionowa urządzenia [W]	250
czynnik chłodniczy	R1234ze / GWP=1
gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO-APARATURA


powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)

\* - stabilność mierzona w geometrycznym środku komory; jednorodność (K) obliczona dla komory jako:

$K = \pm (T \text{ średnie maks.} - T \text{ średnie min.}) / 2$


1 - głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego 50 mm

## OPCJE I AKCESORIA

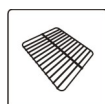

Numer zamówienia: \*/P


półka drucziana

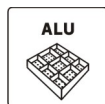

**ALU**

Numer zamówienia: ST/CHL/SWP ALU

szuflada aluminiowa na przewodnicach malowanych proszkowo

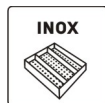

**INOX**

Numer zamówienia: ST/CHL/SWP INOX


szuflada ze stali nierdzewnej na przewodnicach malowanych proszkowo



**INOX/INOX**

Numer zamówienia: ST/CHL/SWPN INOX

szuflada ze stali nierdzewnej na przewodnicach wykonanych ze stali nierdzewnej

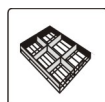


Numer zamówienia: ORG-FARM

organizer farmaceutyczny




Numer zamówienia: QLK\*

kółka jezdne

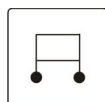


Numer zamówienia: \*/S lub \*/S INOX

Stolik z kółkami jezdnymi

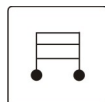

Numer zamówienia: \*/ST lub \*/ST INOX

stelaż z kółkami jezdnymi

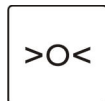

>O<

Numer zamówienia: BRT\*/L IQ/OQ/PQ

Wzorcowanie oraz kwalifikacje IQ, OQ, PQ